



www.bunsen.es

Congeladores serie PLUS



CONGELADOR 300L. C/N Ref. 9214 PLUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Congelador de convección natural diseñado para trabajar desde -40°C hasta 0°C.
 - * Resolución; 0.1°C.
- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304. Puerta sólida.
- * 2 bandejas incluidas, capacidad máxima, 6. Carga 10 kg. Posibilidad de versión reforzada.
 - * Fluctuación de la temperatura a -10°C de 0.5°C.
 - * Variación de temperatura a -10°C de 2.5°C.
- * Puerto de acceso para medición de temperatura externa (OPCIONAL).
 - * Pantalla táctil de 7", nítida, en color.
 - * Puertos USB, LAN y WiFi para transferencia de datos.
- * Programas multisegmentos de tiempo y temperatura (100 segmentos).
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
 - * Función de retardo de inicio ajustable. Rampas ajustables.
- * Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
 - * Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
 - * Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tif. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Alarma del daño del sensor de temperatura.
- * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
- * Sistema de control de fallo de alimentación (el programa continúa después de restaurar la electricidad).
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Alarma visual y sonora.
- * Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
 - * Posibilidad de crear usuarios y asignarles permisos y contraseñas.
 - * Memoria de 40 programas de usuario.
- * Memoria de datos (10,000 datos para cada usuario) con la opción de mostrarlos en el controlador.
 - * Guardar los datos de medición en la memoria externa a través del puerto USB.
 - * Control de acceso protegido a través de la contraseña.
 - * Barra de alarma. Registro de eventos.
 - * Operación con guantes puestos.
- * Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
- * Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador.











Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
9214P	310L.	820 x 1730 x 810mm.	450 x 1120 x 520mm.	185 Kg.	de -40 a 0°C	450

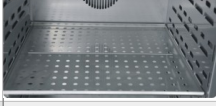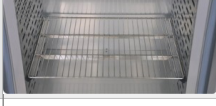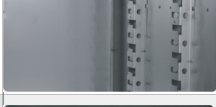

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

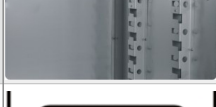

Ref	Accesorios	
9201-01		Cubeta Inox.
9201-02		Bandeja rejilla
9201-03		Bandeja Perforada
9201-04		Bandeja rejilla reforzada
9201-05		Carriles reforzados
9201-06		Luz interior
9201-07		Base con ruedas (según modelos)
9201-08		Versión reforzada hasta 160Kg. Estante reforzado hasta 50Kg.
9201-09		Batería de respaldo para controlador.
9201-10		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

