




www.bunsen.es

# Congeladores

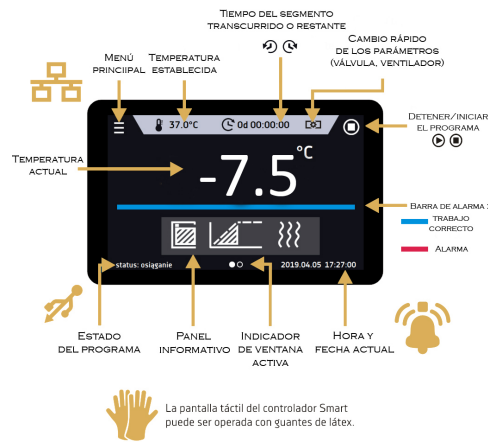

## CONGELADOR 125L. C/N

Ref. 9202

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Congelador de convección natural diseñado para trabajar desde -40°C hasta 0°C.
  - \* Resolución; 0.1°C.
- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304. Puerta sólida.
- \* 2 bandejas incluidas, capacidad máxima, 3. Carga 10kg. Posibilidad de versión reforzada.
  - \* Fluctuación de la temperatura a -10°C de 0.5°C.
  - \* Variación de temperatura a -10°C de 2°C.
- \* Pantalla táctil grande (4,3"), legible y en color, que proporciona las siguientes opciones:
  - \* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB.
  - \* Programas multisegmento de tiempo-temperatura.
  - \* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
  - \* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
  - \* Alarma del daño del sensor de temperatura.
  - \* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
  - \* Sistema de control de fallo de alimentación (programa continúa después de restaurar la electricidad).
  - \* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
  - \* Alarma visual y sonora. Memoria interna para programas y almacenamiento de datos.













BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

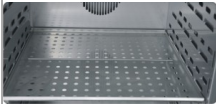

- \* Registro de eventos. Manual de usuario para descarga directa.
- \* Cambio rápido de los parámetros del programa. Barra de alarma.
- \* Operación con guantes puestos.

Fabricado según directivas CE.

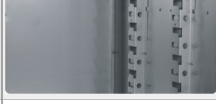Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
9202	130L.	720 x 1190 x 810mm.	370 x 600 x 520mm.	90 Kg.	de -40 a 0°C	450

Ref	Accesorios	
9201-01		Cubeta Inox.
9201-02		Bandeja rejilla
9201-03		Bandeja Perforada
9201-04		Bandeja rejilla reforzada
9201-05		Carriles reforzados
9201-06		Luz interior
9201-07		Base con ruedas (según modelos)
9201-08		Versión reforzada hasta 160Kg. Estante reforzado hasta 50Kg.
9201-09		Batería de respaldo para controlador.
9201-10		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
 Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

