




www.bunsen.es

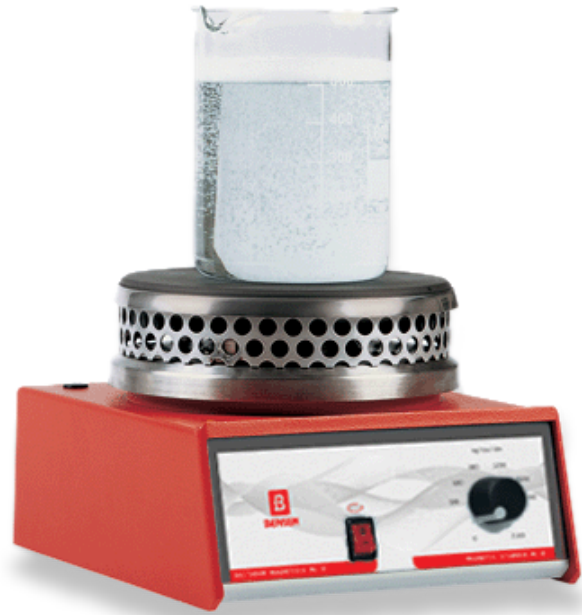

PLACA CALEFACTORA.

Ref. 1501

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Placa calefactora circular de acero indeformable.
- * Mueble exterior de inyección pintado en epoxi.
- * Incorpora termostato de seguridad que desconecta la placa si la temperatura excede de 350°C.
- * Regulación electrónica de la tensión que permite variar la potencia entre el 10% y el 100%.
- * Opcionalmente puede llevar, en la parte posterior, una conexión para termómetro de contacto.
- * Esta provista de interruptor luminoso de puesta en marcha y piloto de señalización de funcionamiento de la resistencia.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Dimensiones An x Al x F	Superficie útil	Temp. máxima	Potencia (W)	Peso (Kg)
1501	180 x 125 x 220mm.	Ø 150 mm.	350°C	1000	2

Ref	Accesorios
1521	Toma posterior para termómetro de contacto
1520	Varilla soporte 12 x 450 mm. adaptable al mueble
1735	Programador digital

